

Cobertores básicos

Naturdrape® Cobertores básicos son eficaces para favorecer el control de la infección en las distintas áreas donde se utilizan. Ofrecen una óptima delimitación de la zona de contaminación gracias a la composición de 2 capas. Clasificados como Clase I estéril (según RD 1591/2009)

CARACTERÍSTICAS

Ajuste perfecto

- ✓ Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado.

Absorción

- ✓ Innovadora capa de TST que favorece la rápida absorción de los fluidos para mantener el entorno de quirófano seco y limpio

Protección


- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y la EN 11135

Normativa europea EN 13795

Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22612
Evaluación de la limpieza microbiana	EN 20811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

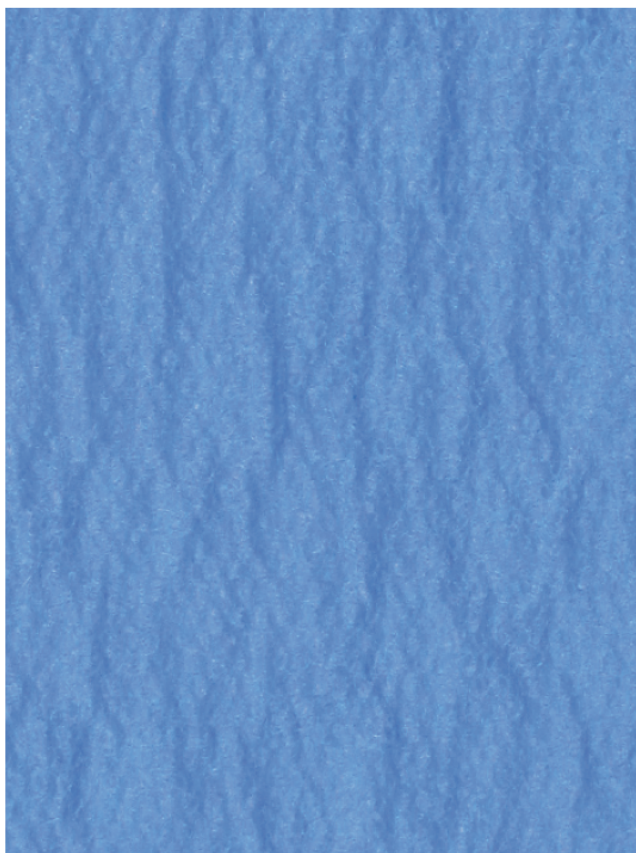

2 capas
POLIPROPILENO
· Hidrofílico

FILM POLIETILENO
· 100% impermeable

Referencias

Medidas (cm)	Presentación	Ref.	Embalaje
50 x 60	1 UI	908856	250
45 x 75	1 UI	908825	250
75 x 90	1 UI	908824	150
100 x 150	1 UI	908823	50
150 x 180	1 UI	908821	30
150 x 200	1 UI	908869	30

STERILE EO

