
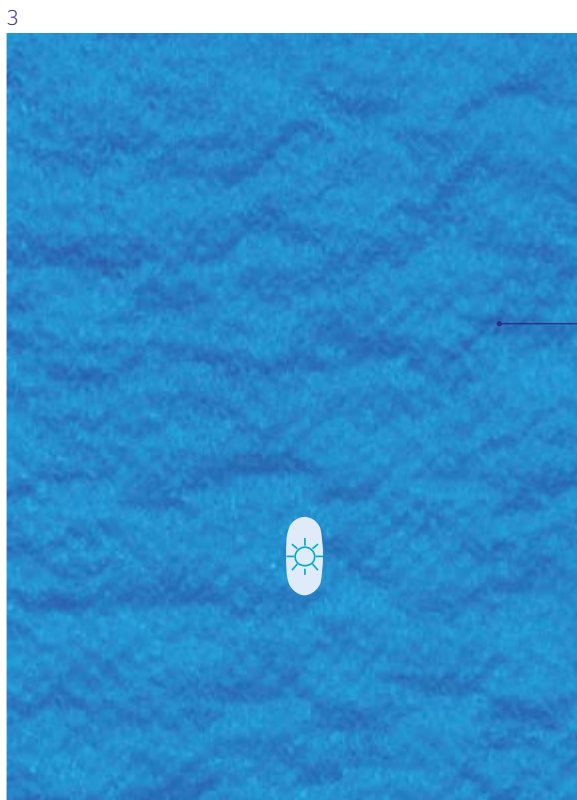


Naturdrape® Set Extremidad mano/pie

Naturdrape® Set Extremidad mano/pie un set quirúrgico diseñado especialmente para operaciones de mano/pie.

Protección

✓ Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción de los fluidos gracias a su capa superior de TST que conserva su resistencia mecánica incluso en condiciones húmedas. Su segunda capa de film de Polietileno proporciona una barrera eficaz al ser 100% impermeable. 3ª Capa de polipropileno que absorbe los líquidos corporales y permite mantener la normotermia del paciente. A su vez, el SMS proporciona una barrera efectiva frente a fluidos y bacterias.

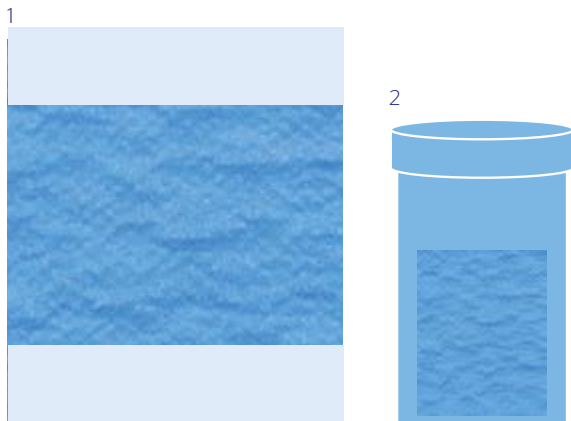

Normativas

✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según la directiva Europea 93/42/CEE.

Normativa Europea EN 13795


	Normativa
Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22610
Resistencia a la penetración de líquidos	EN ISO 811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073-10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

Normativa Europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección

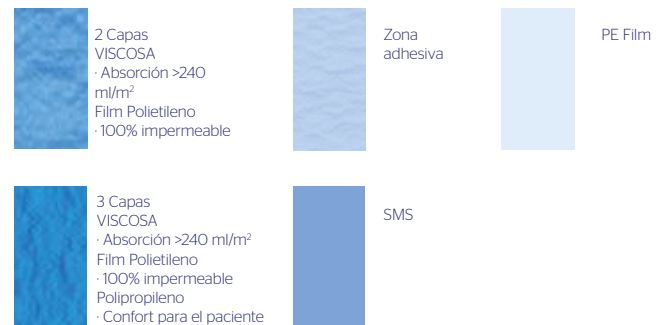

Perfecta adaptación al campo quirúrgico: buena capacidad de drapeado

Referencia Nº Ref.: 964185* (embalaje 15 unidades)

	Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1	Cobertor mesa instrumental	150 x 200
2	Cobertor mesa Mayo	78 x 145
3	Paño extremidad mano/pie fenestrado elástico Ø 3 cm	200 x 300

*Set indicado para cirugías de mano/pié