


# Naturdrape® Set de partos

Naturdrape® Set Partos es un set quirúrgico diseñado especialmente para partos.

## Protección

- ✓ Naturdrape® 2 capas favorece la rápida absorción de los fluidos gracias a su capa superior de TST que conserva su resistencia mecánica incluso en condiciones húmedas. Su segunda capa de film de Polietileno proporciona una barrera eficaz al ser 100% impermeable. A su vez, el SMS proporciona una barrera efectiva frente a fluidos y bacterias.

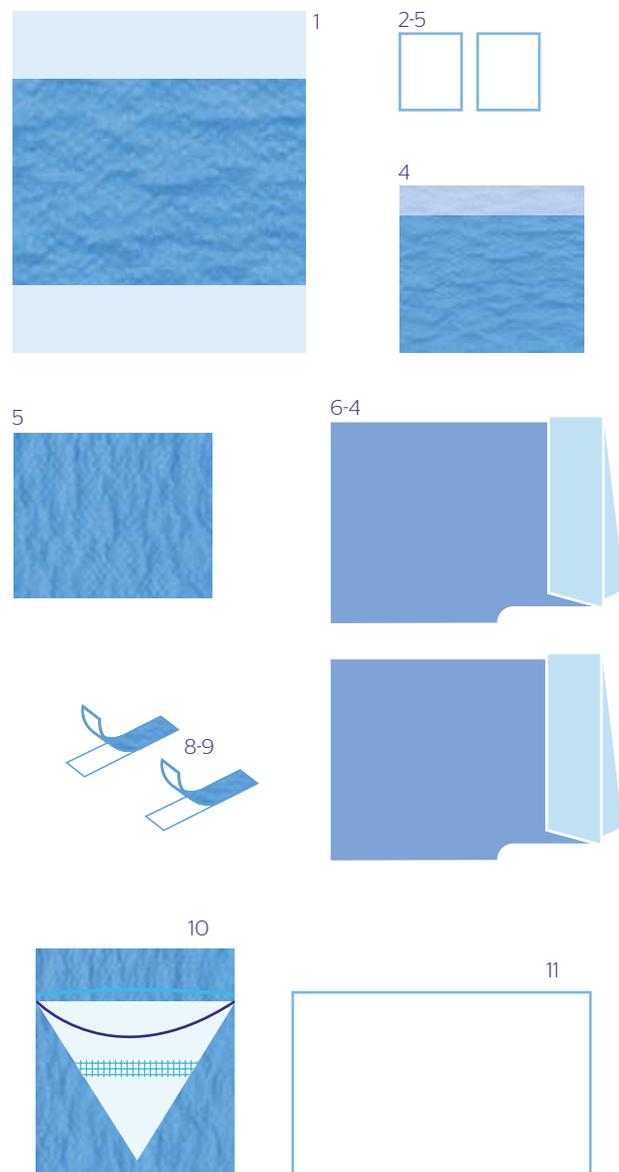

## Normativas

- ✓ Cumple con la normativa europea EN 13795 y EN 11135. Clasificados como Clase I estéril según la directiva Europea 93/42/CEE.

### Normativa Europea EN 13795

	Normativa
Resistencia a la penetración microbiana en estado seco	EN ISO 22612
Resistencia a la penetración microbiana en estado húmedo	EN ISO 22610
Resistencia a la penetración de líquidos	EN ISO 811
Evaluación de limpieza y desprendimiento de partículas	ISO 9073:10
Resistencia a la rotura en seco y húmedo	EN 13938
Resistencia a la tracción en seco y húmedo	EN 29073-3

### Normativa Europea EN 11135

Esterilización de productos sanitarios por óxido de etileno

### Normativa 16 CFR Parte 1610

Inflamabilidad de productos textiles para la confección



Referencia Nº Ref.: 963744\* (embalaje 20 unidades)

	Contenido y orden de extracción	Medidas (cm)
1	Cobertor mesa instrumental	150 x 180
2-3	Toallas (x4)	40 x 40
4	Cobertor con borde adhesivo	75 x 75
5	Cobertor sin borde adhesivo	75 x 90
6-7	Perneras ginecológicas (x2)	75 x 120
8-9	Tira adhesiva	10 x 50
10	Cobertor bajo nalgas con bolsa	100 x 115
11	Cobertor para bebé	75 x 90

\*Indicado para cirugías de partos



STERILE EO

